


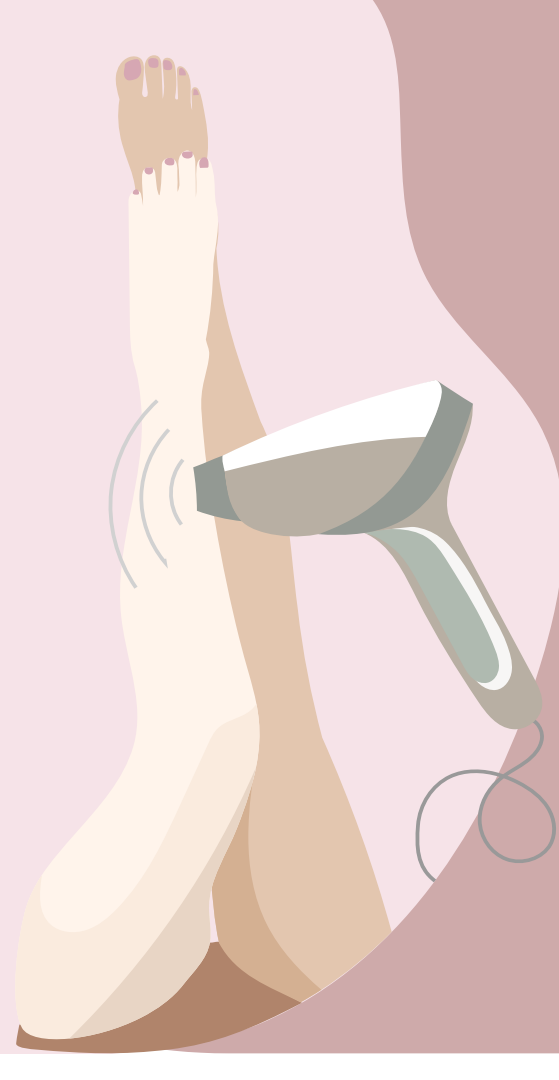

Depilacja laserowa a IPL

Depilacja laserowa i IPL to dwie różne metody usuwania owłosienia, ale działają w podobny sposób.

Oba zabiegi wykorzystują **energię świetlną** do zniszczenia mieszka włosowego, aby zapobiec ponownemu wzrostowi włosów.

DEPILACJA LASEROWA

→ ZALETY



SKUTECZNIE USUWA WŁOSY

ZE WSZYSTKICH CZĘŚCI CIAŁA




ZAZWYCZAJ POZWALA OSIĄGNĄĆ

ZAMIERZONY EFEKT BEZ PODRAŻNIEŃ SKÓRY

NAWET W NAJBARDZIEJ WRAŻLIWYCH

MIEJSCACH

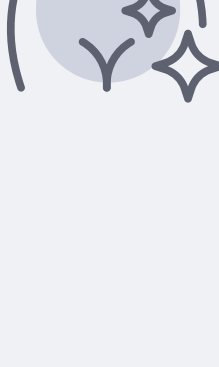

DEPILACJA LASEROWA USUWA

WŁOSY NA DŁUGI CZAS,

A W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH


ZAPEWNIĄ TRWAŁE EFEKTY

→ WADY



MOŻE BYĆ KOSZTOWNA


I ZAWSZE WYMAGA KILKU ZABIEGÓW

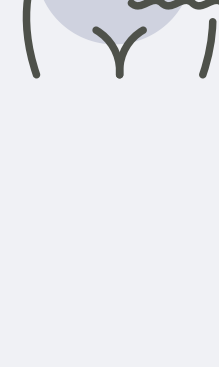

ZABIEG DEPILACJI LASEROWEJ

MOŻE BYĆ BOLESNY DLA

NADWRAŻLIWYCH OSÓB



PRZED ZABIEGIEM NALEŻY

PRZESTRZEGAĆ PEWNYCH ZASAD, TAKICH JAK:

→ UNIKANIE OPALANIA

→ STOSOWANIE KOSMETYKÓW

ZAWIERAJĄCYCH RETINOIDY



DEPILACJA IPL

ZALETY ←

IPL JEST **BEZPIECZNY DLA WSZYSTKICH**

TYPÓW SKÓRY I WŁOSÓW



PO KILKU ZABIEGACH **MOŻNA UZYSKAĆ**


DŁUGOTRWAŁE EFEKTY DEPILACJI



IPL POZWALA NA **SZYBKIE USUWANIE**

NIECHCIANYCH WŁOSÓW

Z RÓŻNYCH CZĘŚCI CIAŁA



WADY ←

ZAZWYCZAJ POTRZEBNE SĄ CO NAJMNIEJ


KILKA SESJI, ABY UZYSKAĆ TRWAŁE EFEKTY



PRZED I PO ZABIEGU IPL NALEŻY UNIKAĆ

SŁOŃCA, CO MOŻE BYĆ UCIAŻLIWE DLA

NIKTÓRYCH OSÓB

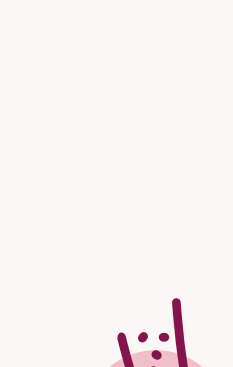

IPL MOŻE NIE BYĆ SKUTECZNY U OSÓB

O CIEMNEJ SKÓRZE LUB JASNYCH WŁOSACH



JAK WYKONAĆ ZABIEG DEPILATOREM PHILIPS LUMEA?



1

Przed zabiegiem dokładnie ogól włoski z obszaru, który chcesz poddać depilacji

2

Wybierz intensywność światła. Możesz w tym celu skorzystać z czujnika SmartSkin, który dobierze odpowiedni poziom dla Twojej skóry.

3

Trzymaj depilator IPL pod kątem 90 stopni do depilowanego obszaru i naciśnij przycisk wyzwalania błysku

4

Po każdym błysku, przesuwaj urządzenie odrobinę, unikając powtarzania zabiegu w tym samym miejscu.

Przeczytaj więcej na
www.philips.pl